



# INGOLD GLAS pH-KATETRAR

## För mätning av gastriskt och esofagealt pH

Ingold glas pH-katetrar M3 för flergångsbruk med intern referenselektrod har utvecklats för att utföra högkvalitativa 24-timmars pH-mätningar i ventrikeln och esofagus. De är erkända som "Gold Standard" vid pH-mätning för läkemedelsstudier under de senaste tre decennierna.

Ingold glas pH-katetrar är noggrannare än antimonkatetrar i alla områden av pH, särskilt i det sura pH-området i magen. De påverkas inte heller av nivån av syrgastrycket (pO<sub>2</sub>) i blodet som orsakar pH-nivåerna att ge falska höga mätvärden med pH-katetrar av antimon under natten när patienten sover.\*

Ingold glas pH-katetrarna tillverkas av vår underleverantör, Mettler-Toledo, som har stor erfarenhet av pH-kateterproduktion och har tillverkat mer än 28 000 pH-katetrar sedan 1975. Alla katetrar är individuellt testade och markerade med ett unikt serienummer för spårbarhet och tillförlitliga inspelningar när du undersöker dina patienter.

### Ingold glas pH-katetrar har följande egenskaper:

- Många intragastriska pH-studier har utförts med glas pH-katetrar för flergångsbruk
- Ingold glas pH-katetrar är enkla att kalibrera och använda och har en lång livstid
- De kan användas med alla modeller av pH-inspelningsapparat, t ex Digitrapper pH
- Den mindre M1.5 modellen används med en extern referenselektrod är anpassad för pediatrika undersökningar
- Fyra avståndsmarkörer visar avståndet från tippen vid 35, 45, 55 och 65 cm

Diameter: 3 or 1.5 mm. Total längd: 190 cm

#### Orderinformation:


2106 - M3

2114 - M1.5 ingen extern referens

2115 - M1.5 med extern referens

Alla katetrar är utrustade med RJ-45 modularkontakt.

\* Dysphagia 10:121-125 (1995)

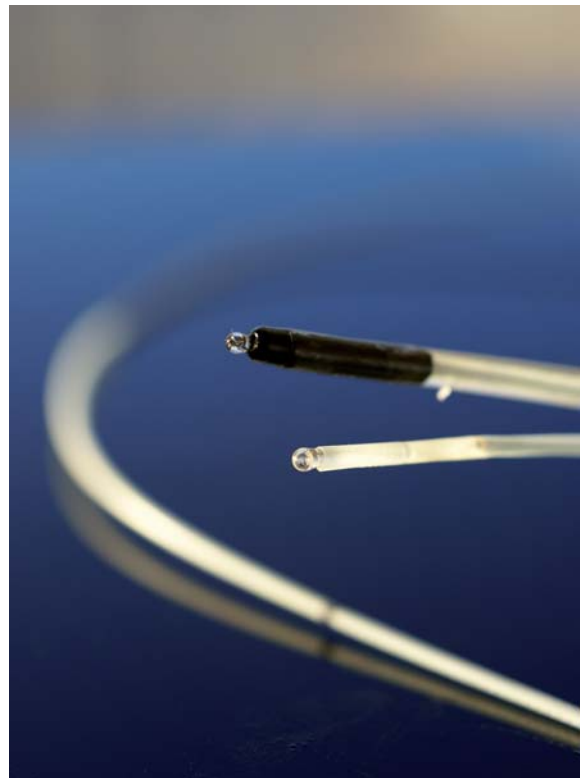

SynMed Medicinteknik AB  
Katrinebergsvägen 6  
117 43 Stockholm  
Sverige  
Tel: +46 8 760 83 00  
Fax: +46 8 760 59 90  
www.synmed.se  
info@synmed.se

Tillverkad av:  
SynMed Medicinteknik AB  
www.synmed.se  
info@synmed.se

**CE**  
**0413**